

הכנה

לנטילת פרודואודופה PRODUODOPA לטיפול בפרקינסון מתקדם

הוראות מפורטות ניתן למצוא בעלון לצרכן ובחוברות ההסבר המפורטות



חשוב מאד לשמור על ניקיון הציוד, להקפיד על שטיפת ידים בכל החלפת עירוי. יש לשנות את מקום העירוי בקביעות בהתאם להמלצות שקיבלת תוך הקפדה על ניקיון מקום ההזרקה - הקפדה על ניקיון תסייע במניעת בעיות עור.

אסוף את הציוד

אסוף את כל הציוד המופיע בחלק האספקה. **בחן אותו וודא שאין פגמים או נזקים ותאריך התפוגה של בקבוקון התמיסה והאביזרים טרם עבר.**

טיפ: מנע מגע של הציוד החד פעמי עם כל משטח לא נקי, על מנת לצמצם סיכון לזיהומים.

כל בקבוקון לתמיסת עירוי תת עורי מכיל:
Foslevodopa 240 mg/ml – פוסלבודופה 240 מ"ג/מ"ל
Foscarbidopa 12 mg/ml – פוסקרבידופה 12 מ"ג/מ"ל

שלבים


עיקריים לעירוי

ככל שתשתמש יותר במערכת פרודואודופה שלך, כך נטילת הטיפול תהפוך לדבר שבשגרה עבורך.

- אסוף את כל האספקה ובדוק את כל הציוד
- רחץ את ידיך ונקה את כל משטחי העבודה
- העבירו את התמיסה מהבקבוקון למזרק
- הסר אוויר מהמזרק
- הכן את המזרק ומקם אותו במשאבה
- פתח את הצינורית של העירוי
- חבר את צינור העירוי למזרק והכן את המשאבה
- חבר את צינור העירוי לצינורית שמתחברת לגוף
- התחל את העירוי



זכור לשמור על ניקיון הפריטים הבאים עד לשימוש בצינור העירוי החדש

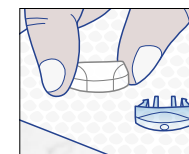

ייתכן שתזדקק להם כדי להגן על קצה צינור העירוי והצינורית שמתחברת לגוף אם אתה מחליף מזרק או צריך להתנתק זמנית מהמשאבה.

- מכסה הפלסטיק הלבן שבקצה צינור העירוי
- הקליפס השקוף בקצה מתקן ההחדרה (הדוקרן)

בדוק את התרופה

בדוק את הנוזל שבבקבוקון על מנת לוודא שאין חלקיקים ושהוא אינו עכור.

אין להשתמש בתרופה אם אתה רואה פתיתים או חלקיקים, או אם התרופה עכורה.

אין לדלל את התרופה או למלא את המזרק במשהו אחר מלבד פרודואודופה.

במידה ובקבוקון התרופה היה בקירור לפני השימוש, השאר אותו בטמפרטורת החדר הרחק מאור השמש, **למשך 30 דקות.**

אין לחמם את התרופה בשום דרך מלבד לאפשר להתחמם בטמפרטורת החדר בתוך הבקבוקון.

הכן את הבקבוקון

- הסר את מכסה הפלסטיק מבקבוקון התמיסה.
- נגב את החלק העליון של כיסוי הבקבוקון עם רפידה אלכוהולית ואפשר לו להתייבש.

חבר את המתאם לבקבוקון

- הסר את מכסה הנייר מאריזת מתאם הבקבוקון. השתמש באריזה על מנת לדחוף את המתאם בחוזקה כלפי מטה כנגד בקבוקון התמיסה עד שתשמע נקישה המעידה על חיבור.
- הסר את האריזה ממתאם הבקבוקון.

הכן את המזרק

- השתמש במזרק חדש וודא שאין אוויר במזרק ע"י דחיפה של בוכנת הגומי עד הסוף.
- הברג את המזרק למתאם הבקבוקון.
- העבר את מלוא תוכן הבקבוקון לתוך המזרק.
- הסר בועות אוויר גדולות.
- הסר בהברגה את המזרק מן ההמתאם.

חיבור צינור ערכת העירוי

- הסר את העטיפה והוצא את צינור העירוי.
- הברג את קצה צינור העירוי על קצה המזרק.
- ודא שהוא מאובטח אך אין להדק יותר על המידה, הנח את קצה הצינור עם אתר החיבור על מגבת נייר נקייה. חבר את קצה הצינור אל המזרק.

הכן את תצוגת המשאבה

- הפעל את המשאבה ולחץ על 'בחר' על מנת לבחור באפשרות 'הכנס מזרק' (Insert Syringe).
- הכנס את המזרק לתוך המשאבה כאשר הבוכנה בחריצי המזרק.

מילוי צינורית העירוי

- הסר את מכסה הפלסטיק (המגן הלבן) מקצה צינור העירוי.

האספקה

ציוד חיוני לטיפול

משאבת עירוי

העברת תמיסה מהמזרק דרך צינור העירוי ואל מקום העירוי.

- המשאבה לא נכבית אף פעם כאשר הסוללות טעונות
- אין להרטיב את המשאבה

בקבוקון פרודואודופה

כל אריזה מכילה 7 בקבוקוני זכוכית שכל אחד מהם מכיל 10 מ"ל של פרודואודופה.

התמיסה היא חסרת צבע עד צהובה/חומה ועלולה להכיל גוון סגול או אדום. אין להשתמש בתמיסה אם היא עכורה או מכילה חלקיקים.

מתאם בקבוקון

מתחבר לבקבוקון ומשמש להעברת פרודואודופה למזרק.

מזרק

לאחר מילוי המזרק בתמיסה הוא יונח במשאבה.

ערכת עירוי

צינור ערכת העירוי

המזרק המונח במשאבה מתחבר לצינור המעביר תמיסה למקום העירוי.

מתקן החדרה (דוקרן) וצינורית שמחוברת לגוף

הדוקרן משמש להחדרה של צינורית המחוברת לגוף למקום העירוי. כשהצינורית שמחוברת לגוף מוחדרת למקום העירוי היא מאפשרת לפרודואודופה לזרום לגוף.

ציוד בערכת העירוי שלך עשוי להיראות שונה מהציוד המוצג כאן.

סוללות ופריטי טעינה

משמשות כמקור כוח להפעלת המשאבה. סוללה טעונה במלואה צריכה להחזיק מעמד לפחות 24 שעות.

בזמן שאחת משתי הסוללות נמצאת במשאבה, טען את הסוללה השנייה למקרה הצורך.

המתאם עשוי להיראות שונה מזה המוצג כאן.



IL-PRODD-240015 – APR 24

- הקפד שהמכסה ישאר נקי ויאוחסן במקום נקי.
- וודא שקצה צינור העירוי שוכב באופן שטוח על מגבת נייר נקייה, המשך לשאוב תמיסה על ידי לחיצה על 'Prime' עד שתראה טיפת תמיסה על מגבת הנייר.

הכנת אזור העירוי

- בחר את אזור העירוי שלך ונקה את מקום העירוי באמצעות רפידה אלכוהולית. הסר בזירות את הנייר מהדבק בתחתית הדוקרן (מתקן ההחדרה), הקפד לא לגעת ברפידה הדביקה.

חיבור הצינורית המתחברת לגוף

- השתמש במתקן ההחדרה (דוקרן) להחדיר את הצינורית לתוך העור שלך באזור העירוי הנבחר.
- לחץ על כפתור ההפעלה האדום כלפי מטה עד הישמע 'קליק'.
- חבר את צינור ערכת העירוי אל הצינורית שמחוברת לגוף.
- וודא שהוא מחובר היטב כדי למנוע דליפה.

התחלת העירוי

- אתחל את המשאבה, וודא שהמשאבה מעבירה את העירוי לגופך.
- טיפ: זכור להחליף את הסוללה הנמצאת במשאבה בסוללה טעונה לגמרי כל 24 שעות.**

ציוד

נלווה לטיפול

מגבות נייר חד פעמיות

עוזרות לשמור על משטח עבודה נקי.

רפידות אלכוהול

עוזרות לנקות את העור ולשמור על נקיון הציוד.

חשוב לשמור על סביבה נקייה על מנת למנוע זיהומים, לכן דאג תמיד למגבות נייר ורפידות אלכוהול בקרבת מקום.



אביזרי העירוי המתכלים הניתנים לשימוש עם פרודואודופה והמשאבה:

- מתאם בקבוקון West
- ערכת עירוי ConvaTec neria Guard
- מזרק B. Braun

המידע מוגש על ידי חברת abbvie המידע המובא אינו מהווה המלצת רופא, חוות דעת מקצועית או תחליף למי מהם.

לשאלות נוספות לכל הנדרש ניתן לפנות לצוות הרפואי המטפל או לצוות Abbvie care.

אין במידע הנ"ל שום המלצה לשימוש בתרופה כלשהי או במוצר רפואי. למידע מלא על התרופה יש לעיין בעלון לצרכן. לקבלת עלון לצרכן ניתן לפנות למאגר התרופות של משרד הבריאות או לבעל הרישום:

חברת אבוי ביופארמה, רחוב החרש 4, בניין D ת.ד 1014, הוד השרון 4511001, טלפון 09-7909600

מידע זה עומד בדרישות משרד הבריאות מידע זה נכון לאפריל 2024